



# Flocare syöttöletkut

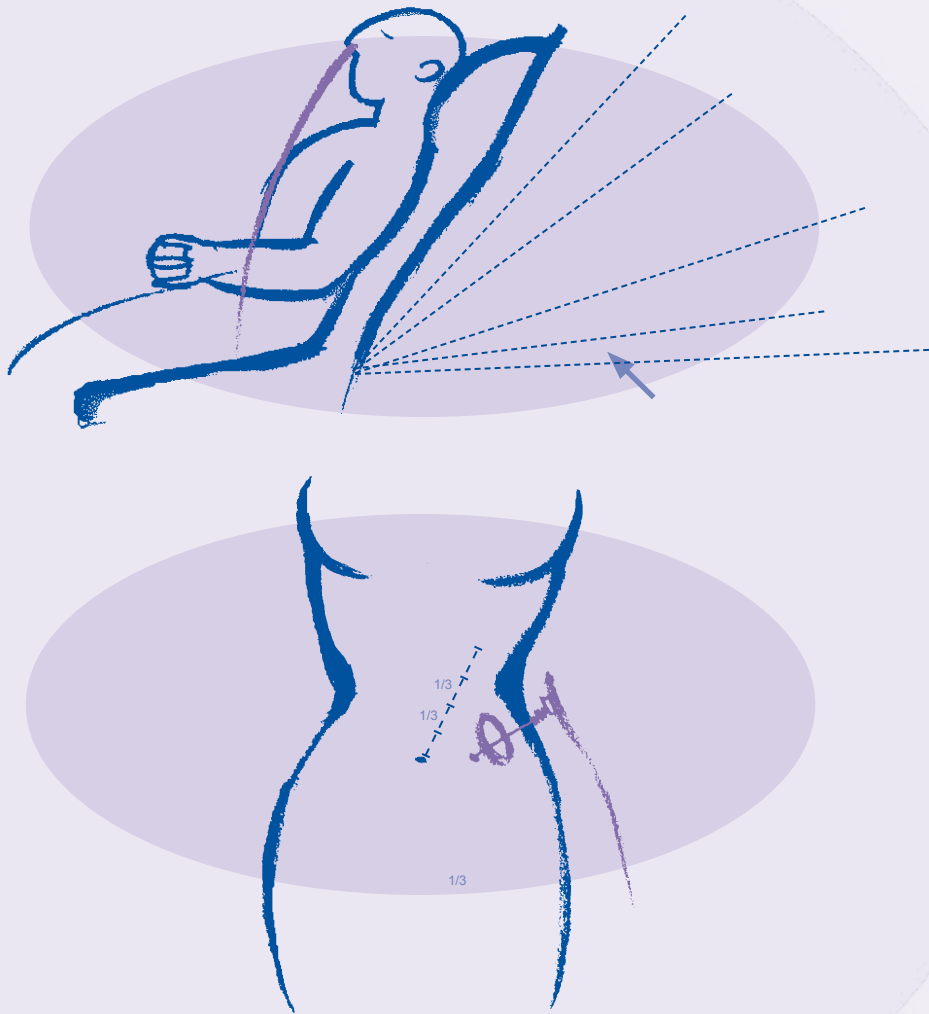

### Flocare PUR syöttöletku

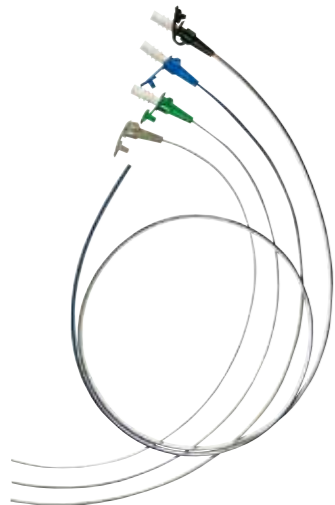

#### Käyttö:

Nasogastrinen syöttöletku letkuruokintaan joko mahalaukuun tai pohjukaissuoleen.

#### Ominaisuudet:

- Röntgenpositiivinen, läpinäkyvä polyuretaaniletku
- Useita kokoja sekä lapsille että aikuisille (ks. takasivu)
- Letkussa valmiiksi liukastettu ohjainvaijeri, jossa aspirointikanta
- Värikoodattu ruokintayhdistäjä, jossa kaksoiskorkki
- Pituusmerkinnät 10 cm välein
- Pyörästetty avonainen kärki ja kaksi sivuaukkoa (Ch 5/50 cm letkussa suljettu kärki)
- Steriili
- Kertakäyttöinen

#### Vaihtoväliuositus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

### Flocare Bengmark nasojejunaaliletku



#### Käyttö:

Nasojejunaaliletku letkuruokintaan pohjukais- tai ohutsuoleen, esim. varhaiseen postoperatiiviseen letkuruokintaan.

#### Ominaisuudet:

- Röntgenpositiivinen polyuretaaniletku
- Koko ja pituus ks. takasivu
- Pituusmerkinnät 10 cm välein
- Kärkipaksunnos, jossa neljä sivuaukkoa
- Letkun kärki on n. 23 cm:n matkalta spiraalimaisesti kierteillä (Flocare Bengmark -patentti)
- Erillinen Hydromer-päällysteinen ohjainvaijeri, jonka kärjessä suojapaksunnos
- Letkussa kiinteästi kaksoiskorkillinen polyuretaaninen ruokintayhdistäjä. Mikäli letku halutaan lyhentää, on tilattava erillinen metallikiinnityksellä oleva ruokintayhdistäjä (35718)
- Steriili
- Kertakäyttöinen

#### Vaihtoväliuositus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

### Flocare Bengmark PEJ-letku



#### Käyttö:

PEG:n kautta asetettava jejunaaliletku letkuruokintaan pohjukais- tai ohutsuoleen, silloin kun potilaan mahalaukku halutaan pitää tyhjänä esim. imun avulla.

#### Ominaisuudet:

- Kuten Flocare Bengmark nasojejunaaliletkussa, paitsi:
- Hydromer-päällysteinen kärkipaksunnos, jossa neljä sivuaukkoa sekä absoorboitu vasta langasta silmukka ohjaamista varten
  - Letkussa paikalleen asetettuna Ch 18 Y-yhdistäjä, joka liitetään PEG Ch 18:aan jejunaaliletkun läpivientä ja mahaimua varten
  - Letkussa kaksoiskorkillinen polyuretaaninen ruokintayhdistäjä sekä erillinen metallikiinnityksellä oleva ruokintayhdistäjä
  - Erillinen Hydromer-päällysteinen 90 cm ohjainvaijeri, jossa aspiraatiokanta
  - Steriili
  - Kertakäyttöinen

#### Vaihtoväliuositus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

### Flocare PEG-letku



#### Käyttö:

Perkutaaninen endoskooppinen gastrostomialetku pitkäaikaiseen letkuruokintaan mahalaukuun.

#### Ominaisuudet:

- Läpinäkyvä 40 cm pituinen, rtg-positiivinen carbothane-polyuretaaniletku, jossa
  - sisäinen pidikelevy
  - Hydromer-päällysteinen silmukallinen kärki
  - pituusmerkinnät sentin välein ad 12 cm pidikelevystä
- Koot ks. takasivu
- Silikoninen kiinnityslevy, joka
  - estää letkun taittumisen
  - kiinnittää letkun vatsan iholle
- Polyuretaaninen monikäyttöinen ruokintayhdistäjä
- Erillinen lisäpidike, joka varmistaa kiinnityksen
- Pikasulkija

#### Setissä mukana:

- Sisäänvientikanyyli
- Silmukallinen vaijeri
- Veitsi

PEGin voi korvata myöhemmin Flocare G-letkulla tai cuBBy-napilla.

#### Vaihtoväliuositus:

Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

### Flocare Gastrostomialetku



#### Käyttö:

Letkuruokintaan PEG:n tai napin tilalle stoomakanavan muodostumisen jälkeen. Paineenalentamiseen mahalaukusta. (Gastrostomian teosta vähintään 6 viikkoa).

#### Ominaisuudet:

- Silikoninen 14 cm pituinen gastrostomialetku, jossa ballonki
- Koot ks. takasivu
- Pituusmerkinnät sentin välein ad 6 cm ballongista.
- Ruokintayhdistäjä, jonka sivussa värikoodattu ballongin täyttöreitti
- Silikoninen kiinnityslevy, joka
  - estää letkun taittumisen
  - kiinnittää letkun vatsan iholle
- Pikasulkija

### Flocare cuBBy nappi



#### Käyttö:

Letkuruokintaan PEG:n tilalle stoomakanavan muodostumisen jälkeen. Paineenalentamiseen mahalaukusta. (Gastrostomian teosta vähintään 6 viikkoa).

#### Ominaisuudet:

- Silikoninen ballongillinen syöttönappi
- Neljä pehmeää siipeä
  - paine jakautuu laajemmalle alueelle
  - pysyy hyvin paikallaan
  - ilma pääsee kiertämään napin ja ihon välistä
- Koot ja pituudet ks. takasivu
- 3 erilaista syöttöletkua
  - ruokintayhdistäjä joko luer-lock tai kaksoiskorkillinen sekä bolusanosteluun tarkoitettu
  - pitävä kiinnitys nappiin
- Mittaletku stoomakanavan pituuden mittaamiseen

#### Setissä mukana:

- Syöttönappi
- Liukastusaine, sidetaitos, 6 ml ruisku
- Syöttöletku kulmayhdistimellä

#### Vaihtoväliuositus:

2–3 kk. Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

### Flocare Jejunokath



#### Käyttö:

Varhaiseen postoperatiiviseen letkuruokintaan maha-/suolikanavaleikkauksen yhteydessä asetettava jejunostomialetku.

#### Ominaisuudet:

- Läpinäkyvä 50/70 cm pituinen, rtg-positiivinen polyuretaaniletku, jossa
  - silikoninen kiinnityslevy
  - kaksoiskorkillinen ruokintayhdistäjä
- Koot ks. takasivu
- Pituusmerkintä 20 cm kohdalla

#### Setissä mukana:

- Halkaistava kanyyli ilman ohjainta
- Halkaistava kanyyli, jossa pyöreäkärkinen ohjain, suolen seinämän tunneointia varten

#### Vaihtoväliuositus:

6 vk (CE). Letkua voi käyttää niin kauan kuin se moitteetta toimii.

## Flocare PUR syöttöletku (myyntiyksikkö = my 10 kpl)

Tilaus-numero	Koko	Tuote-numero	Värikoodi	Sisä-/Ulko-halkaisija
1533595	Ch 5/50 cm	35218	harmaa	1,0/1,7 mm
1533561	Ch 6/60 cm	35219	vihreä	1,1/2,0 mm
1533579	Ch 6/90 cm	35220	vihreä	1,1/2,0 mm
1533587	Ch 6/110 cm	35221	vihreä	1,1/2,0 mm
1533603	Ch 8/90 cm	35223	sininen	1,8/2,7 mm
1610849	Ch 8/110 cm	35224	sininen	1,8/2,7 mm
1533611	Ch 8/130 cm	35225	sininen	1,8/2,7 mm
1610997	Ch 10/110 cm	35226	musta	2,1/3,3 mm
1533629	Ch 10/130 cm	35227	musta	2,1/3,3 mm
1533637	Ch 12/110 cm	35228	valkoinen	2,6/4,0 mm
1533645	Ch 14/110 cm	35229	vihreä	3,2/4,7 mm

## Flocare Bengmark nasojejunaaliletku (my 3 kpl)

Tilaus-numero	Koko	Tuote-numero	Värikoodi	Sisä-/Ulko-halkaisija
1127786	Ch 10/145 cm	35231	musta	2,4/3,3 mm

## Flocare PEG-letku (my 1 kpl)

Tilaus-numero	Koko	Tuote-numero	Värikoodi	Sisä-/Ulko-halkaisija
1117555	Ch 10	35427	musta	2,1/3,3 mm
1117522	Ch 14	35428	vihreä	3,2/4,7 mm
1207851	Ch 18	35429	punainen	4,4/5,9 mm
<i>Seuraavien my 10 kpl:</i>				
1117548	Ch 10	35718	ruokintayhdistäjä,	musta
1117514	Ch 14	35716	ruokintayhdistäjä,	vihreä
1207869	Ch 18	35717	ruokintayhdistäjä,	punainen
1117589	Ch 10	35709	kiinnityslevy	
1117571	Ch 14	35710	kiinnityslevy	
1207877	Ch 18	35711	kiinnityslevy	

## Flocare Gastrostomialetku (my 2 kpl)

Tilaus-numero	Koko	Tuote-numero	Värikoodi	Sisä-/Ulko-halkaisija
1127992	Ch 10/3 ml	3523	valkoinen	1,7/3,3 mm
1128008	Ch 14/5 ml	3524	vihreä	1,9/4,6 mm
1128016	Ch 18/20 ml	3525	punainen	3,1/5,9 mm
1744283	Ch 20/20 ml	35426	keltainen	3,5/6,6 mm

## Flocare Bengmark PEJ-letku (my 1 kpl)

Tilaus-numero	Koko	Tuote-numero	Värikoodi	Sisä-/Ulko-halkaisija
1533660	Ch 8/90 cm	35430	sininen	2,0/2,6 mm
<i>Seuraavan my 10 kpl:</i>				
1129162	Ch 8	35703	ruokintayhdistäjä,	sininen

## Flocare Jejunoskath (my 1 kpl)

Tilaus-numero	Koko	Tuote-numero	Värikoodi	Sisä-/Ulko-halkaisija
1207885	Ch 5/50 cm	35424	harmaa	1,1/1,7 mm
1922525	Ch 8/70 cm	35402	sininen	1,5/2,6 mm

## Flocare cuBBY nappi (my 1 kpl)

Tilaus-numero	Koko	Tuote-numero
1983477	Ch 12/1 cm	35447
1983485	Ch 12/1,5 cm	35452
1983493	Ch 12/2 cm	35453
1983501	Ch 12/2,5 cm	35454
1983519	Ch 12/3 cm	35455
1983527	Ch 12/3,5 cm	35456
1982941	Ch 14/1 cm	35431
1982958	Ch 14/1,5 cm	35432
1982966	Ch 14/2 cm	35433
1982974	Ch 14/2,5 cm	35434
1982982	Ch 14/3 cm	35435
1982990	Ch 14/3,5 cm	35436
1983006	Ch 14/4 cm	35437
1983014	Ch 14/4,5 cm	35438
1983535	Ch 16/1 cm	35457
1983543	Ch 16/1,5 cm	35458
1983550	Ch 16/2 cm	35459
1983568	Ch 16/2,5 cm	35460
1983576	Ch 16/3 cm	35461
1983584	Ch 16/3,5 cm	35462
1983592	Ch 16/4 cm	35463
1983600	Ch 16/4,5 cm	35464
1983022	Ch 18/1 cm	35439
1983030	Ch 18/1,5 cm	35440
1983048	Ch 18/2 cm	35441
1983055	Ch 18/2,5 cm	35442
1983063	Ch 18/3 cm	35443
1983071	Ch 18/3,5 cm	35444
1983089	Ch 18/4 cm	35445
1983097	Ch 18/4,5 cm	35446
1983618	Ch 20/1 cm	35465
1983626	Ch 20/1,5 cm	35466
1983634	Ch 20/2 cm	35467
1983642	Ch 20/2,5 cm	35468
1983659	Ch 20/3 cm	35469
1983667	Ch 20/3,5 cm	35470
1983675	Ch 20/4 cm	35471
1983683	Ch 20/4,5 cm	35472
1983691	Ch 24/1 cm	35473
1983709	Ch 24/1,5 cm	35474
1983717	Ch 24/2 cm	35475
1983725	Ch 24/2,5 cm	35476
1983733	Ch 24/3 cm	35477
1983741	Ch 24/3,5 cm	35478
1983758	Ch 24/4 cm	35479
1983766	Ch 24/4,5 cm	35480
<i>Seuraavien my 5 kpl:</i>		
1983774	syöttöletku kulmayhdistimellä	35763
1983782	luer-lock syöttöletku kulmayhdistimellä	35764
1983790	bolussyöttöletku	35765
1983105	mittaletku	35762

Tilaukset ja jakelu: Tamro Oy



Nutricia Medical Oy  
Linnankatu 26 A, 20100 Turku  
Puh. (02) 274 4111, faksi (02) 274 4100  
www.nutricia.fi info-suomi@nutricia.com